



SAFE AGE

WWW.SAFEAGE.EU



This product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser. This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.


EN

ASSEMBLY INSTRUCTION




STEP 1:

Put the seal upside down and attention to the Triangle marked in the above picture.

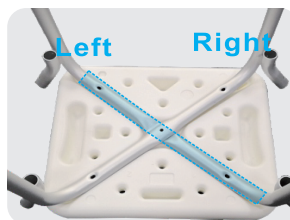

STEP 2:

Attention the Left and Right marked in the above picture, place the centrally concave down tubing on the left side and centrally concave up tubing on the right side.

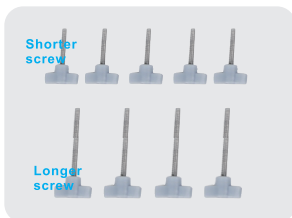

STEP 3:

Please check the attached nine thumb screws like the above picture, five shorter ones and four longer ones.




STEP 4:

Insert the shorter thumb screw through the middle hole but do not fully tighten the screw.



STEP 5:

Assemble backrest by taking the "L" shaped backrest support tubings and securing them to the back rest using four shorter thumb screws like the picture above.

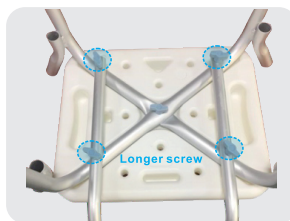

STEP 6:

Attach the backrest to the seat by aligning holes on the "L" shaped backrest tubings and fix, using four longer thumb screws like the picture above. Please fully tighten the middle screw and all other thumb screws and check to make sure all screws are fully tightened.



STEP 7:

Turn shower chair over. Slide arms into mounts and lock into place with spring loaded push-pins.



STEP 8:

Fully Assembled product. Connect chair legs and blue padding.

Periodically check assembly for continued tightness.

Never use bath safety seat if any looseness in the assembly is noticed, as personal injury may result. Sit. Do not stand on this seat to avoid dangerous fall.

The weight capacity is 140KG.



SAFE AGE

WWW.SAFEAGE.EU



Dit product is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap voor de levensduur van de oorspronkelijke koper. Dit apparaat is gebouwd volgens strenge normen en zorgvuldig geïnspecteerd voor verzending. Deze levenslange beperkte garantie is een uitdrukking van ons vertrouwen in de materialen en het vakmanschap van onze producten en onze verzekering aan de consument van jarenlange betrouwbare service. In het geval van een defect dat onder deze garantie valt, zullen wij, naar onze keuze, het apparaat repareren of vervangen. Deze garantie dekt geen defecten aan het apparaat die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of nalatigheid van de eigenaar, of normale slijtage. De garantie geldt niet voor duurzame onderdelen, zoals rubberen accessoires, wieltjes en handgrepen, die aan normale slijtage onderhevig zijn en periodiek vervangen moeten worden.


NL

ASSEMBLAGE-INSTRUCTIE




STAP 1:

Leg het Zitvlak ondersteboven en let op de driehoek die op de bovenstaande foto is aangegeven.

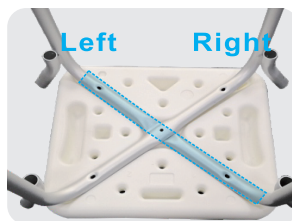

STAP 2:

Let op de foto (linkerkant en rechterkant). Plaats de gebogen stang precies zoals op de afbeelding is afgebeeld op links en vervolgens op rechts.

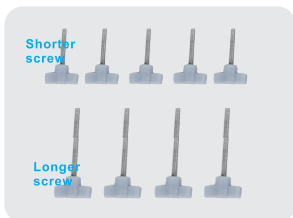

STAP 3:

Controleer de bijgevoegde negen duimschroeven zoals op de bovenstaande foto, vijf kortere en vier langere.




STAP 4:

Steek de kortere duimschroef door het middelste gat, maar draai de schroef niet helemaal vast.



STAP 5:

Zet de rugleuning in elkaar door de "L" vormige rugleunings-teunbuizen te nemen en vast te zetten aan de rugleuning vast te zetten met vier kortere duimschroeven, zoals op de foto.

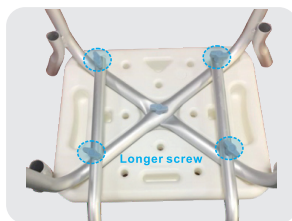

STAP 6:

Bevestig de rugleuning aan de zitting door de gaten in de "L"-vormige buizen van de rugleuning uit te lijnen en vast te zetten met vier langere duimschroeven, zoals op de afbeelding hierboven. Draai de middelste schroef en alle andere duimschroeven helemaal vast en controleer of alle schroeven goed vastzitten.



STAP 7:

Draai de douchestoel om. Schuif de armen in de houders en zet ze vast met veerbelaste push-pins.



STAP 8:

Installeer de poten en de blauwe opvulling

Controleer regelmatig of de assemblage nog goed vastzit.

Gebruik het badzitje nooit als u merkt dat de montage niet soepel zit, omdat persoonlijk letsel het gevolg kan zijn. Zit. Ga niet op dit zitje staan.

De gewichtscapaciteit is 140KG.



SAFE AGE

WWW.SAFEAGE.EU



Dieses Produkt ist garantiert frei von Material- und Verarbeitungsfehlern für die Lebensdauer des ursprünglichen Käufers. Dieses Gerät wird nach anspruchsvollen Standards gebaut und vor dem Versand sorgfältig geprüft. Im Falle eines Defekts, der unter diese Garantie fällt, werden wir das Gerät nach unserem Ermessen reparieren oder ersetzen. Diese Garantie deckt keine Gerätedefekte ab, die auf Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Eigentümers oder auf normale Abnutzung zurückzuführen sind. Die Garantie erstreckt sich nicht auf langlebige Teile, wie z. B. Gummizubehör, Räder und Griffe, die einem normalen Verschleiß unterliegen und in regelmäßigen Abständen ersetzt werden sollten.


DE

MONTAGEANLEITUNG




STAP 1:

Legen Sie den Sitz auf den Kopf und beachten Sie das Dreieck, das in der obigen Abbildung zu sehen ist.

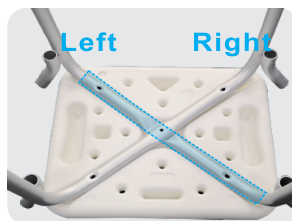

STAP 2:

Beachten Sie das Bild (linke und rechte Seite). Platzieren Sie die gebogene Stange genau wie auf dem Bild links und dann rechts.

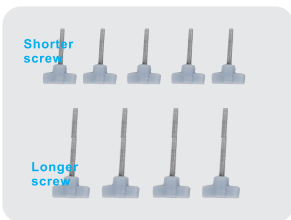

STAP 3:

Überprüfen Sie die beiliegenden neun Rändelschrauben, wie in der Abbildung oben gezeigt, fünf kürzere und vier längere.




STAP 4:

Führen Sie die kürzere Rändelschraube durch das mittlere Loch ein, aber ziehen Sie die Schraube nicht ganz fest.



STAP 5:

Montieren Sie die Rückenlehne, indem Sie die "L"-förmigen Stützrohre der Rückenlehne nehmen und sie mit vier kürzeren Rändelschrauben an der Rückenlehne befestigen (siehe Abbildung).

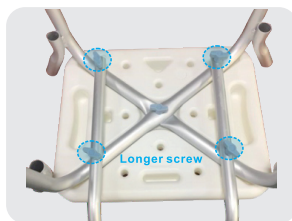

STAP 6:

Befestigen Sie die Rückenlehne am Sitz, indem Sie die Löcher in den "L"-förmigen Rohren der Rückenlehne mit vier längeren Rändelschrauben ausrichten und sichern, wie in der Abbildung oben gezeigt. Ziehen Sie die mittlere Schraube und alle anderen Rändelschrauben vollständig an und prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind.



STAP 7:

Drehen Sie den Duschstuhl um. Schieben Sie die Arme in die Halterungen und sichern Sie sie mit federbelasteten Druckstifte.



STAP 8:

Montieren Sie die Beine und die blaue Polsterung

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Montage noch dicht ist.

Benutzen Sie den Badewannensitz nicht, wenn Sie feststellen, dass er nicht richtig sitzt, da dies zu Personenschäden führen kann. Sitzen. Stellen Sie sich nicht auf diesen Sitz.

Die Gewichtskapazität beträgt 140KG.